





# GLOW

Różdźka LED do pielęgnacji twarzy 4w1

## Instrukcja obsługi

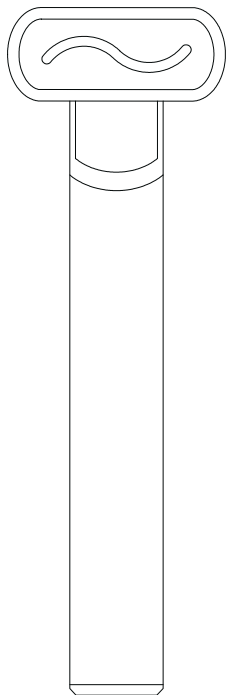

Zawiera  
przyrząd kosmetyczny  
kabel ładujący  
instrukcja obsługi

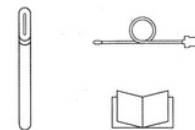

### Charakterystyka produktu

#### Bio-mikroelektronika

Wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne wykorzystuje najnowszą technologię badawczo-rozwojową - biologiczną mikroelektryczność. Tradycyjna funkcja jonowa ma tylko jony dodatnie lub ujemne, podczas gdy biologiczna mikroelektryczność obejmuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, podobnie jak częstotliwość radiowa RF, co jest równoważne dwukrotnemu efektowi tradycyjnego mikroprądu.



#### Rozgrzewanie

Funkcja rozgrzewania może skutecznie złagodzić zmęczenie skóry i pobudzić krążenie krwi. Długotrwałe stosowanie może złagodzić problemy skórne, takie jak cienie pod oczami, worki pod oczami i obrzęki. Może być również wykorzystywane z serum i kremami w celu zwiększenia wchłaniania.



#### Resurfacing

Wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne wykorzystuje czerwone światło o długości fali 620-630 nm. Komórki skóry właściwej mogą absorbować czerwone światło i przyspieszać syntezę komórek i kolagenu, aby osiągnąć efekt ujędrnienia skóry, rozjaśnienia śladów trądziku i poziomu melaniny.



#### Wibracje soniczne

Zastosowanie mikrowibracji dźwiękowych może przekształcić serum i kremy w małe cząsteczki, które są następnie wprowadzane do skóry co wspomaga ich wchłanianie.





Inteligentne włączanie, inteligentne oszczędzanie energii  
Gdy trzymasz urządzenie The Wand, głowica masująca dotyka skóry, a wielofunkcyjny przyrząd do pielęgnacji oczu zaczyna działać i zatrzymuje się, gdy go odsuwasz.



Obrotowa końcówka 270°  
Innowacyjny obrót o 270° sprawia, że urządzenie lepiej dostosowuje się do różnych części ciała, takich jak okolice oczu i ust, a także do całej skóry twarzy i szyi.

#### Stosowanie

Oczyść twarz, aby zapobiec wpływowi sebum na komfort użytkownika.

Długotrwałe stosowanie może skutecznie złagodzić problemy skórne, takie jak drobne zmarszczki wokół oczu, cienie pod oczami, worki pod oczami, bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki na szyi itp. oraz ujędrnić i wygładzić skórę. W przypadku różnych części twarzy można zmienić odpowiedni kąt użytkowania w zależności od potrzeb.

Sposób użycia pokazano na poniższym rysunku. Zaleca się stosowanie urządzenia od dotu do góry, aby uzyskać efekt liftingu.



Okolice oczu



Twarz



Szyja

#### Ładowanie

Podłącz jeden koniec kabla USB do ładowania do gniazda ładowania w dolnej części urządzenia do pielęgnacji oczu, a drugi koniec do ładowarki lub portu USB komputera.

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik szybko miga.
- Podczas ładowania wskaźnik miga powoli.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik jest stale włączony. Czas pełnego ładowania wynosi 100 minut. Bateria wyczerpie się po 60 minutach ciągłego użytkowania.
- Czas ładowania nie powinien przekraczać 24 godzin.

#### Środki ostrożności

- Nie wolno demontować ani przerabiać urządzenia bez zezwolenia.
- Nie należy ustawiać prowadnicy w przeciwnym kierunku,
- Ze względu na odchylenie wartości oporu ludzkiego ciała, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Po użyciu należy przetrzeć urządzenie czystą szmatką lub wilgotnym ręcznikiem papierowym.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak wibracje podczas użytkowania, należy sprawdzić, czy bateria nie jest rozładowana lub wyłączyć urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć ekspozycji na światło słoneczne.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie nie może być używane jako zabawka.

#### Parametry urządzenia

Numer modelu urządzenia: RL05-C

Materiał produktu: stop aluminium/PC

Moc: 1,5 W

Napięcie: 3,7 V

Pojemność baterii: 350mAh

Napięcie wejściowe ładowania: 5V=1A

Wymiary: 150\*15\*12mm